

# SKINTACT® EASIBEAT

Electrodes de défibrillation multifonctions & Electrodes de défibrillation

## Améliorer les standards

Dans les cas d'urgence, les compétences du clinicien sont nécessaires, mais aussi des dispositifs médicaux de sauvetage fiables comme les électrodes de défibrillation.

Ces produits doivent fonctionner de manière fiable, même dans des conditions difficiles, car chaque seconde peut compter.

Elles doivent aussi être faciles à utiliser sans compromis pour la sécurité. Les électrodes SKINTACT Easibeat de chez Leonhard Lang fournissent le plus haut degré de sécurité et sont en même temps rapides et faciles à utiliser.

- » Excellente performance et adhérence fiable avec une longue durée de vie atteinte grâce à des matériaux et des processus de fabrication adaptés
- » Manipulation rapide et facile résultant d'une attention particulière portée aux détails.
- » Sûres à utiliser à la fois pour le patient et l'opérateur grâce à une conception et une taille adaptée pour les enfants.



C-Line signifie "guéri en ligne".

En travaillant en ligne, Leonhard Lang peut déployer des matériaux ou des propriétés uniquement là où ils sont nécessaires dans un produit, en vous apportant les électrodes les plus performantes possibles.

Les électrodes de défibrillation et les électrodes de défibrillation Easibeat sont fabriquées à l'aide de la technologie unique C-Line de Leonhard Lang. C-Line empêche le délaminage et le rétrécissement du gel en combinant la fabrication de l'hydrogel et de la plaque de défibrillation en une seule fois.

C-Line vous garantit également une durée de conservation maximale et réduit considérablement les coûts tout en assurant la qualité constante et reproductible de tous les produits de défibrillation SKINTACT.





## SKINTACT® Easibeat

### Electrodes de defibrillation multifonctions pour Adultes

Sont conçues pour l'utilisation de la defibrillation externe, de la stimulation non-invasive, de la cardioversion synchronisée et de la surveillance chez les adultes et les enfants pesant plus de 25 Kg

Les électrodes de defibrillation Multifonctions Skintact® Easibeat sont disponibles avec différents connecteurs et compatibles avec les défibrillateurs ci-dessous:

Connecteur / Poche	Colour Code	Code	Connecteur compatible avec:
 	Yellow	<b>DF20N &amp; préconnectée DF20NC</b>	<b>Physio-Control:</b> Lifepak 9, Lifepak 10, Lifepak 12, Lifepak 15, Lifepak 20, Lifepak 500, Lifepak 1000
 	Green	<b>DF27N &amp; préconnectée DF27NC</b>	<b>Philips Heartstart:</b> FR2, FR2 (+), FR3, Heartstream Forerunner, Heartstart MRx, Heartstart XL, Heartstart XL+
 	Red	<b>DF28N &amp; préconnectée DF28NC</b>	<b>Zoll:</b> E Series, M Series, R Series, PD 1200, PD 1400, PD 1600, PD 1700, PD 2000
 	Pink	<b>DF59N &amp; preconnect DF59NC</b>	<b>Zoll:</b> E Series, M Series, R Series, AED PLUS, AED PRO
 	Orange	<b>DF25N</b>	<b>Schiller:</b> Schiller FRED, FRED Tele, DG1002, DG2002, DG3002, DG2000E, DG2000EDOS
 	sans	<b>DF26N</b>	<b>Philips Codemaster:</b> XE, XL, XL+, 100
 	sans	<b>DF43N</b>	<b>Nihon Kohden:</b> <b>Avec adaptateur JC-755V:</b> TEC-5500 Series, TEC-7600 Series, TEC-7700 Series <b>Avec adaptateur JC-855V:</b> TEC-8300 Series



## SKINTACT® Easibeat

### Electrodes de defibrillation multifonctions pour Enfants

Sont concues pour l'utilisation de la defibrillation externe, de la stimulation non-invasive, de la cardioversion synchronisée et de la surveillance chez les enfants pesant moins de 25 Kg

Les électrodes de defibrillation multifonctions pédiatriques Skintact® Easibeat sont disponibles avec différents connecteurs et sont compatibles avec les défibrillateurs ci-dessous:

Connecteur	Code	Poids Max	Connecteur compatible avec :
	<b>DF30G</b>	<b>&lt;25kg</b>	<b>Zoll:</b> E Series, M Series, R Series, PD 1200, PD 1400, PD 1600, PD 1700, PD 2000
	<b>DF31G</b>	<b>&lt;25kg</b>	<b>Physio-Control:</b> Lifepak 9, Lifepak 10, Lifepak 12, Lifepak 15, Lifepak 20
	<b>DF32G</b>	<b>&lt;25kg</b>	<b>Philips Heartstart:</b> Heartstart MRx, Heartstart XL, Heartstart XL+
	<b>DF36G</b>	<b>&lt;25kg</b>	<b>Philips Codemaster:</b> XE, XL, XL+, 100
	<b>DF37G</b>	<b>&lt;25kg</b>	<b>Nihon Kohden:</b> <b>Avec adaptateur JC-755V:</b> TEC-5500 Series, TEC-7600 Series, TEC-7700 Series <b>Avec adaptateur JC-855V:</b> TEC-8300 Series
	<b>DF72G</b>	<b>&lt;25kg</b>	<b>Zoll:</b> E Series, M Series, R Series, AED PLUS, AED PRO

Toutes les électrodes de defibrillation multifonctions SKINTACT® Easibeat sont conformes aux clauses particulières de la norme CEI 60601-2-4 pour les défibrillateurs cardiaques.

#### Conditionnement standard

Pour toutes les électrodes de defibrillation SKINTACT® Easibeat  
1 pair / poche • 10 poches / boite

# SKINTACT® Easibeat

## Electrodes de défibrillation

Les électrodes de défibrillation jetables facilitent et augmentent la sécurité lors de l'utilisation des palettes. Les électrodes de défibrillation Skintact® Easibeat DF01 peuvent être appliquées rapidement, adhèrent à la peau et peuvent être utilisées avec toutes les palettes standards.

Elles sont fabriquées avec un gel unique qui assure la transmission de l'énergie en raison d'un contact complet avec la peau et les palettes. Des aides à la manipulation sont fournies pour manipuler et placer avec précision les électrodes.



Type	Code	Taille	Conservation	Conditionnement
	<b>DF01</b>	Adulte	24 Mois	1 set / poche 10 sets / boîte

Les électrodes de defibrillation Skintact® Easibeat sont conformes aux clauses particulières de la norme CEI 60601-2-4 pour les défibrillateurs cardiaques.

## VUE D'ENSEMBLE

### Les électrodes de défibrillation jetables

sont utilisées couramment pour la cardioversion synchronisée et pour l'arrêt cardiaque soudain. Des câbles de haute qualité sont fixés à l'électrode et isolés de manière fiable pour protéger le patient et l'opérateur contre les étincelles.


- » Absorption de l'eau par le gel
- » Adhérence sur la peau transpirante
- » L'utilisation de plusieurs couches fines augmente la flexibilité de l'électrode
- » Zone de contact maximale > impédance minimale et réduit l'exposition thermique et mécanique de la peau

### Multifonction:

La continuité du soin du patient évite le remplacement des électrodes entre les étapes du traitement du patient

### Une qualité assurée:

Chaque électrode est soumise à inspection et tests avant emballage

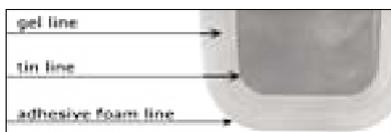

### Gel de contact:

Cette technologie unique minimise le risque de brûlures en raison de l'élimination de l'exposition au bord en étain



### Rapide et facile:

Attache extensible conçue pour le retrait et l'application rapide et facile.



### Câble à l'extérieur de la poche:

Les électrodes préconnectées permettent une connexion rapide au défibrillateur avant intervention.



### Code couleur:

Pour une différenciation facile



### Tracabilité facile:

Les doubles étiquettes sur chaque poche facilitent la documentation du dossier patient.

## LEONHARD LANG

Depuis notre siège mondial niché dans les Alpes autrichiennes, nous misons sur plus d'un siècle de production et de services axés sur la qualité. Dans le même temps, nous relevons les défis de demain avec des avancées souvent brevetées dans la conception de produits, maintenus à la fine pointe par la technologie, la recherche et le développement axés sur l'utilisateur.

Nous développons, fabriquons et distribuons globalement des électrodes et des accessoires pour l'ECG, l'électrochirurgie, la défibrillation et la stimulation cardiaque, ainsi que des gels et des fixations.

Pour justifier votre confiance, notre système de gestion de la qualité est certifié selon les normes ISO 9001 et ISO 13485 et pour certaines lignes de produits de l'annexe II de la directive européenne sur les dispositifs médicaux. Nous exploitons également un système de management environnemental certifié ISO



### Leonhard Lang GmbH

Archenweg 56  
6020 Innsbruck, Austria  
[www.LeonhardLang.at](http://www.LeonhardLang.at)

Tel. +43-512-33 42 57, Fax 39 22 10  
[medical@leonhardlang.at](mailto:medical@leonhardlang.at)



### Nos produits sont distribués en France par la société IMMED EUROPE

IMMED EUROPE  
Paec d'activité de la Broye, Rue du Chauffour  
59710 Ennevelin  
[contact@immed.net](mailto:contact@immed.net) [www.immed.net](http://www.immed.net)  
Tel: 03 28 55 02 55 Fax: 03 28 55 02 58

