

# RIGEL Uni-Therm

## TESTEUR DE BISTOURIS ELECTRIQUES



TESTEUR DE GENERATEURS HF CONFORME A LA NORME CEI60601-2-2.  
PERMET DE TESTER LES TECHNOLOGIES UTILISANT DES FORTS COURANTS.



MESURE DES PUISSANCES DE SORTIE (6AMP RMS)

MESURE DES COURANTS DE FUITE HF

TEST REM (SECURITE PLAQUE)

Modes Manuel et Automatique

Large Ecran Couleur

Séquences de tests programmables

Mémoire interne (5000 Tests environ)

Visualisation des courbes à l'écran

Charges de 0 à 5100Ω par pas de 10Ω

Charges REM de 0 à 500Ω par pas de 1Ω

Test des puissances jusqu'à 6A (RMS)

Port USB et Bluetooth

Sortie Oscilloscope

### Mesure des puissances de sortie :

- Mesures de Puissance, Intensité, Tension et Facteur de Crête
- Puissance de 0 à 500 Watts (RMS)
- Impédances de charge de 0 à 5100Ω par pas de 10Ω
- Mode Single
- Mode Distribution de Puissance avec délai réglable
- Visualisation de la courbe à l'écran
- Isolation de 10kVolts des circuits de mesure
- Charges céramiques non inductives 1%

### Mesure des courants de fuite HF :

- Conforme à la norme CEI 60601-2-2
- Mesures sur l'Actif et le Dispersif
- Charges fixes (2\*200 Ω) de 250 Watts
- Charge variable

### Test REM (Remote Electrode Monitoring) :

- Contrôle de l'alarme haute
- Contrôle de l'alarme basse
- Contrôle de la variation d'impédance
- Charges de 0 à 500Ω par pas de 1Ω
- Modes manuel ou automatique

### Livré avec :


- Câble d'alimentation
- Manuel d'utilisation
- Dongle Bluetooth
- Certificat d'étalonnage
- Application de transfert des données

### Accessoires optionnels :

- Logiciel Med-eBase v2
- Lecteur de code barre Bluetooth (réf. 339A923)
- Imprimante Test'n Tag Elite Bluetooth (réf. 339A970)
- Clavier (usb)
- Valise de transport
- Câbles de raccordement pour simulation contrôle pédale (Erbe, Valleylab etc...)

### Divers :

- Librairie de séquences de test en mémoire
- Visualisation des schémas de raccordement s sur l'écran couleur
- Chargement des courbes de références constructeur en mémoire
- Commutateur rotatif : facilite d'utilisation
- Possibilités d'insertion de liste de contrôle à un test
- Garantie 1an, 2ans si calibration annuelle par Rigel

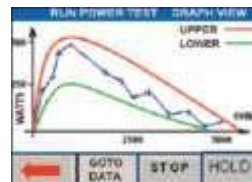

IMMED Europe Parc d'activité de la Broye – 59710 ENNEVELIN  
Tél : (0033)3 28 55 02 55 fax : (0033)3 28 55 02 58 www.immed.net

App/012/12/A